

Manual de Operação

BALANÇA PERSONAL UP 150S



BALANÇA LINHA PERSONAL UP 150S

1. INSTRUÇÕES

Para uma adequada utilização e manutenção do equipamento, por favor, leia este manual antes de operar o equipamento.

Sua nova balança eletrônica personal foi projetada para indicar com precisão o seu ganho ou perda de peso. Se for utilizada corretamente, ela deverá durar muitos anos.

2. ESPECIFICAÇÕES

- Capacidade: 150Kg (330lbs/24st);
- Divisões: 100g/0,2lb;
- Carga mínima: 2Kg;
- Acionamento automático quando colocada alguma variação de peso em cima do equipamento;
- Função auto-zero;
- Desligamento automático;
- Indicador da carga da bateria no display;
- Indicador de sobrecarga;
- Alimentação: 1 bateria de lítio de 3 V (inclusa);
- Quando apresentar “LO” no display, abra a tampa da bateria e troque por uma nova. Cuide a polaridade da mesma ao encaixar.
- Unidades de medida: Kg/lb/st:lb;
- Dimensões do equipamento: 235x135x20mm

3. OPERAÇÃO



1) Ligando:

Atrás do equipamento, posicione a chave seletora para “ON”.

Ao ligar, no mostrador aparecerá dígito “8” (oito) durante mais ou menos um segundo;



2) Puxe o display para fora, coloque a balança posicionada numa superfície plana, lisa e rígida (evite carpetes ou superfícies macias):

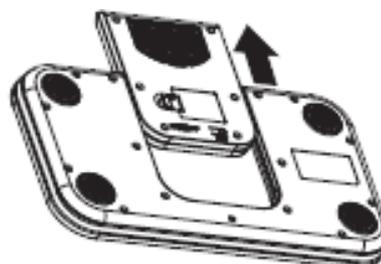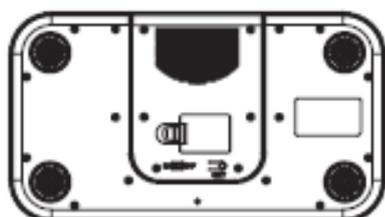

3) Pise levemente na balança, até que o dígito “8” (oito) apareça no mostrador



4) Suba na balança e permaneça numa posição fixa por alguns instantes, até que seja exibido seu peso. O usuário pode descer da balança.

Caso nenhum peso seja colocado sobre a superfície da balança (estando a mesma ligada) por aproximadamente 10 segundos, ela se desliga automaticamente.

Nota: Quando o display apresentar o valor “0.0”, e você estiver segurando a balança nas mãos (ou na troca de uma superfície para outra), coloque a plataforma numa superfície dura, e suba somente quando aparecer “0.0” no display (após dois segundos).



3.1 Troca de Unidade de Medida (Kg/Lb/St:Lb)

Durante o modo de pesagem, aperte a chave “unit” para escolher a unidade de medida desejada, localizada atrás da balança.



3.2 Indicador de Sobrecarga

Quando a balança está sobrecarregada (acima de 150Kg), o mostrador exibe uma mensagem de erro (“Err”).



4. RECOMENDAÇÕES DE USO

- Posicione a balança numa superfície rígida e plana evita erros de pesagem;
- Evite impactos da balança com outros objetos ou com o solo;
- Durante a pesagem, manter o corpo estável. Não deixe o corpo balançar;
- Limpe a balança com um pano úmido, mas não permita que qualquer líquido penetre;
- Não utilizar produtos químicos durante a limpeza;
- Para garantir a durabilidade da balança, não deixe-a em locais muito quentes e/ou úmidos;
- Não utilize a balança em comércios legais;
- Não sobrecarregar a balança, pois o sensor da mesma pode sofrer danos;

- Não deixar peso em cima da balança, quando não estiver usando-a;
- Não posicione a balança numa posição vertical quando não estiver em uso.
- Se ficar por muito tempo sem utilizar a balança, deixe a chave seletora “ON-OFF” na posição “OFF”, ou deixe a balança sem bateria;
- Nunca force o display da balança, pois é frágil;
- Caso a balança não esteja respondendo às suas operações, confira se a bateria está carregada (nova) e/ou encaixada corretamente de acordo com a polaridade da mesma.